

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitezy twarzy**

Symbol kwalifikacji: **MED.06**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut

MED.06-01-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Na otrzymanych modelach roboczych dognij elementy z drutu do aparatu elastycznego Stockfische zgodnie z zaleceniami lekarza zawartymi w karcie laboratoryjnej i technologią wykonawstwa ruchomych aparatów ortodontycznych.

Zarysuj na modelach roboczych linie pomocnicze wyznaczające zakres odciążeń woskowych.

Dognij łuk wargowy typu Schwarza, dwie sprężyny Coffina na modelu górnym oraz jedną sprężynę Coffina na modelu dolnym.

Następnie wykonaj odciążenia woskowe na modelach roboczych i przyklej do nich punktowo za pomocą wosku modelowego sprężyny Coffina. Łuk wargowy przyklej do modelu górnego od strony przedsionkowej.

Gotową pracę zostaw na stanowisku egzaminacyjnym.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne narzędzia i sprzęt.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

- górny łuk wargowy typu Schwarza – od strony przedsionkowej,
- górny łuk wargowy typu Schwarza – od strony podniebiennej,
- górne sprężyny Coffina umieszczone na odciążeniu woskowym,
- dolna sprężyna Coffina umieszczona na odciążeniu woskowym,
- odciążenia woskowe na modelach roboczych


oraz

przebieg wykonania odciążeń na modelach roboczych i dogięcia elementów drucianych do aparatu Stockfische.


KARTA LABORATORYJNA

Nazwisko i imię	<i>Winnicki Ksawery</i>						
Adres	<i>ul. Kolejowa 41/5, 58-309 Wałbrzych</i>						
Wiek pacjenta	<i>11 lat</i>						
Rodzaj pracy	Płytki Schwarza		Aparat Klammta		Aparat Stockfisch	X	Aparat Hyrax

MODEL GÓRNY

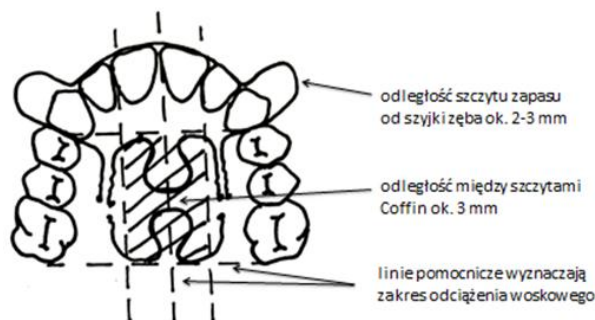

MODEL DOLNY

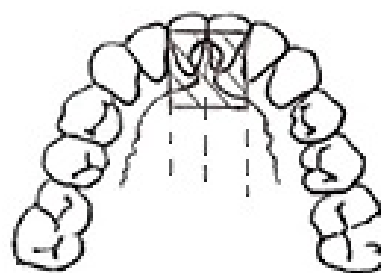

PLAN LECZENIA

DATA	POSTĘPOWANIE KLINICZNE	POSTĘPOWANIE LABORATORYJNE
<i>02.06.2026 r.</i>	<i>pobranie wycisków</i>	<i>sporządzenie modeli roboczych</i>
<i>05.06.2026 r.</i>	<i>gotowy aparat</i>	<i>wykonanie aparatu</i>

Zalecenia lekarza

1. Poziomy odcinek łuku powinien przylegać do najbardziej wysuniętych powierzchni wargowych zębów siecznych.
2. Poziomy odcinek łuku wargowego powinien przebiegać w połowie wysokości zębów siecznych.
3. Sprężyny podniebienne powinny być do siebie zbliżone kształtem i wielkością.
4. Sprężyny górne powinny być położone wzdłuż linii szwu podniebiennego, a dolna między zębami siecznymi przyśrodkowymi.
5. Sprężyny Coffina powinny być położone w granicach odciążenia woskowego.
6. Odciążenia woskowe powinny mieć grubość około 1-2 mm.

Małkowski Jan
/podpis lekarza/