

EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2026 ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-26.01-SG**
 Symbol kwalifikacji: **MED.12**
 Numer zadania: **03**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień *Miesiąc* *Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji

Wpisane:

1	Myjnia dezynfektor nr 1, Proces nr 1, kolumna B: kleszczyki laparoskopowe, trokar laparoskopowy						
2	Myjnia dezynfektor nr 1, Proces nr 1, kolumna D: Wskaźnik nr 2 lub nr 2, Wskaźnik nr 8 lub nr 8						
3	Myjnia dezynfektor nr 1, Proces nr 1, wiersz Zwolnienie wsadu: zaznaczone NIE						
4	Myjnia dezynfektor nr 1, Proces nr 2, kolumna B: maska twarzowa, resuscytator Ambu, maska krtaniowa, rura oddechowa						
5	Myjnia dezynfektor nr 1, Proces nr 2, kolumna D: Wskaźnik nr 10 lub nr 10, Wskaźnik nr 9 lub nr 9						
6	Myjnia dezynfektor nr 1, Proces nr 3, kolumna B: igłotrzymacz, nożyczki chirurgiczne, pęseta anatomiczna, kleszczyki okienkowe						
7	Myjnia dezynfektor nr 1, Proces nr 3, kolumna D: Wskaźnik nr 10 lub nr 10, Wskaźnik nr 4 lub nr 4						

Rezultat 2: Karta sterylizacji

Wpisane:

1	w kolumnie A wyłącznie: maska twarzowa, resuscytator Ambu, maska krtaniowa, rura oddechowa, igłotrzymacz, nożyczki chirurgiczne, pęseta anatomiczna, kleszczyki okienkowe						
2	w kolumnie C: Wskaźnik nr: 1, Typ: 5, Nazwa: Wskaźnik chemiczny zintegrowany/ zintegrowany						
3	w kolumnie D: Wskaźnik nr: 1, Typ: 5, Nazwa: Wskaźnik chemiczny zintegrowany/ zintegrowany						
4	w kolumnie E: zaznaczono x dla Geobacillus stearothermophilus						

Rezultat 3: Etykieta I i Etykieta II

Wpisane:

1	Etykieta I w wierszach: Zawartość pakietu: Nożyczki chirurgiczne, Użytkownik: Poradnia Chirurgiczna						
2	Etykieta I w wierszach: Data sterylizacji pakietu: data egzaminu, Data ważności pakietu: 1 rok od daty egzaminu - wpisana w formacie dd-mm-rrrr						
3	Etykieta II w wierszach: Nazwa zestawu: Zestaw zabiegowy Użytkownik: Klinika Otolaryngologii						
4	Etykieta II w wierszach: Data sterylizacji pakietu: data egzaminu, Data ważności pakietu: 1 miesiąc od daty egzaminu - wpisana w formacie dd-mm-rrrr						

Rezultat 4: Pakiet z nożyczkami chirurgicznymi

1	Zgrzewy zamykające pakiet są ciągle na całej szerokości, bez kanałów i rys						
2	Ostrza nożyczek chirurgicznych zabezpieczone są osłonką						
3	Odległość pomiędzy końcem pakietu a zgrzewem od strony otwarcia wynosi co najmniej 2 cm						
4	Uchwyty nożyczek skierowane są w kierunku otwierania pakietu, na pakiecie nie ma plam pochodzących z oleju do konserwacji narzędzi						
5	Wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik chemiczny zintegrowany typu 5						

Rezultat 5: Pakiet z Zestawem zabiegowym

W celu oceny R.5.1-5.5 należy otworzyć pakiet

1	Zestaw zapakowany jest techniką równoległą w dwie warstwy opakowania sterylizacyjnego						
2	Części chwytne narzędzi ułożonych na tacy narzędziowej skierowane są w tym samym kierunku						
3	Wewnątrz pakietu znajdują się: pęseta anatomiczna, szpatułka metalowa, wziernik nosowy, uchwyt do skalpela						
4	Wewnątrz pakietu umieszczony jest wskaźnik chemiczny wieloparametrowy typu 4						
5	Pakiet zamknięty jest taśmą neutralną i taśmą wskaźnikową lub tylko wskaźnikową						

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, przygotowanie narzędzi do sterylizacji

Zdający zgłosi przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	wykonał higieniczną dezynfekcję rąk techniką Ayliffe'a, 6 etapów postępowania, minimum pięciokrotne powtórzył czynności, założył czepek zakrywając nim włosy						
2	wykonał dezynfekcję blatu chusteczkami dezynfekcyjnymi						
3	sprawił pod lampą z lupą czystość nożyczek						
4	naniósł olej konserwujący na przegub nożyczek, wykonał kilkakrotne ruchy otwierania i zamykania narzędzia						
5	wykonał po konserwacji test funkcyjny nożyczek - wykonując minimum 3 niezależne cięcia na kompresie gazowym						
6	sprawił pod lampą z lupą czystość pęsety anatomicznej, szpatułki metalowej, wziernika nosowego, uchwytu do skalpela						
7	naniósł olej konserwujący na przegub wziernika nosowego, wykonał kilkakrotne ruchy otwierania i zamykania narzędzia						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Wykonanie testu funkcyjnego zgrzewarki, pakowanie nożyczek chirurgicznych i Zestawu zabiegowego

Zdający zgłosi przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	wykonał test funkcyjny zgrzewarki przed wykonaniem zgrzewu pakietu z nożyczkami, opisał test datą egzaminu i wynikiem						
2	zapakował nożyczki w jedną warstwę rękawa papierowo-foliowego						
3	umieścił tacę z zestawem na środku arkusza papieru krepowanego i wykonał kolejne etapy pakowania jak na ilustracji nr 1						
4	założył papier na brzegach i wywinął na wierzch tacy jak na ilustracji nr 2, nie zakleił pakietu taśmą						
5	umieścił tacę zapakowaną w papier krepowany na środku arkusza włókniny w kolorze innym niż papier i wykonał kolejne etapy pakowania jak na ilustracji nr 1						
6	założył włókninę na brzegach i wywinął na wierzch tacy jak na ilustracji nr 2, zakleił pakiet taśmą						
7	uporządkował stanowisko pracy, wykonał dezynfekcję blatu chusteczkami dezynfekcyjnymi, zdjął czepek i umieścił w koszu na odpady						


Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Ilustracja nr 1

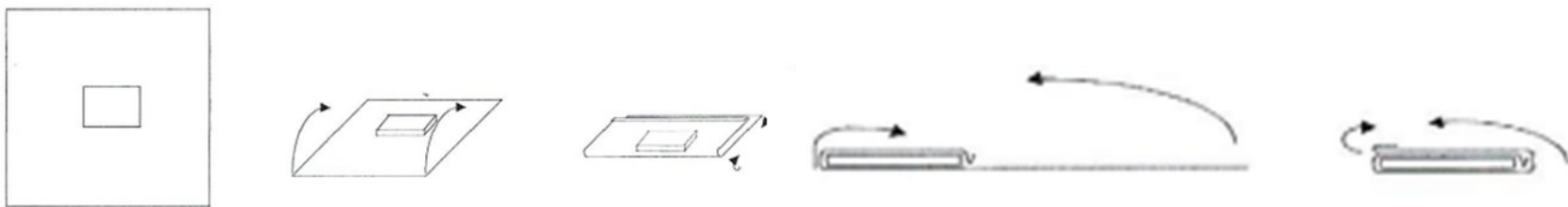

Ilustracja nr 2

