

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitezy twarzy**

Symbol kwalifikacji: **MED.06**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

MED.06-02-25.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Przygotuj otrzymane modele robocze oraz wykonaj woskowe odciążenie płytki przedsionkowej Hotza.

Ukończenie tego etapu pracy zgłoś do oceny przez podniesienie ręki.

Następnie wymodeluj płytkę przedsionkową Hotza w wosku, dognij oraz umocuj uchwyt zgodnie z zaleceniami lekarza dentysty zawartymi w Karcie laboratoryjnej oraz technologią wykonawstwa ruchomych aparatów ortodontycznych.

Aparat w fazie wosku wraz z modelami pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne narzędzia i sprzęt.

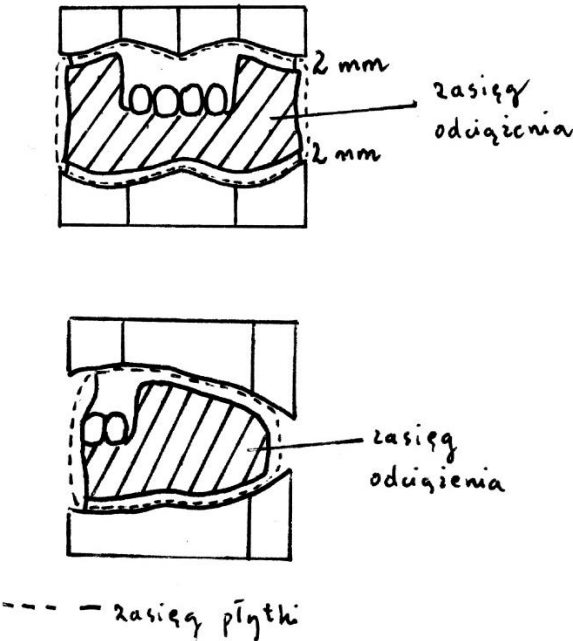
Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będzie 3 rezultaty:

- przygotowane modele robocze i wykonane woskowe odciążenie płytki przedsionkowej Hotza,
- wymodelowana woskowa płytka przedsionkowa Hotza,
- dogięty oraz umocowany uchwyt płytki przedsionkowej Hotza

oraz

przebieg przygotowania modeli roboczych i wykonania odciążenia aparatu oraz wykonania płytki przedsionkowej Hotza w fazie wosku.

KARTA LABORATORYJNA nr 0254			ORTOLab ul. Kręta 5 00-125 Warszawa
Imię i nazwisko: Mikołaj Czok	Wiek: 5 lat	PESEL: 19311214782	Adres zamieszkania: ul. Łużycka 1 47-303 Nysa
Projekt 			Rodzaj wykonywanej pracy: Płytką przedsionkową Hotza wykonaną metodą polimeryzacji termicznej długoczasowej
Etapy pracy			
Data		Etap	
16.12.2024 r.		Pobranie wycisków	
20.12.2024 r.		Sporządzenie oraz przygotowanie modeli roboczych Wykonanie płytki przedsionkowej Hotza	
23.12.2024 r.		Oddanie aparatu pacjentowi	
Uwagi do pracy			
Proszę: - połączyć modele w zwarcu centralnym woskiem kleistym, od strony językowej, - zarysować zasięg odciążenia i płytki aparatu, - wykonać odciążenie aparatu o grubości płytki wosku, - wykonać odciążenie tak, by obejmowało: przedsionkowe powierzchnie kłów górnych, zębów bocznych górnych oraz wszystkich zębów dolnych wraz z wyrostkami żębołłowymi, - ograniczyć odciążenie tak, by kończyło się ok. 2 mm od sklepienia i dna przedsionka jamy ustnej, - dociąć uchwyt aparatu z drutu o $\varnothing$ 0,9 mm tak, by miał kształt koła o średnicy ok. 1,5 cm, a jego zakończenia miały długość co najmniej 2 cm, - wymodelować płytkę o grubości ok. 2 - 3 mm tak, by sięgała do sklepienia i dna przedsionka jamy ustnej oraz kończyła się za ostatnimi zębami stojącymi w łuku.			
lekarz dentysta Janusz Kret			